



Creating balance in healthcare



Tilbanden & Accessoires



'De tilband is de helft van de tillift'

Wij bieden u een uitgebreid assortiment tilbanden en tilaccessoires. Deze onderscheiden zich in de grote diversiteit in materialen, modellen en maten zodat uw tillift en plafondtillift in alle omstandigheden met de juiste tilband bruikbaar is.

Met de juiste tilbanden en tilaccessoires kan het personeel alle soorten til- of verplaatssituaties gemakkelijk, veilig en probleemloos aan. De tilbanden omvatten een reeks oplossingen voor het tillen van cliënten in staande, achteroverzittend of horizontale posities. Elk model heeft unieke eigenschappen die speciaal aan de verschillende behoeften zijn aangepast.

De keuze van het materiaal vormt een belangrijke schakel wanneer het de aanschaf van een tilband betreft. Onze tilbanden worden van verschillende materialen gemaakt, welke elk voor zich speciale eigenschappen bezitten. Het meest voorkomende materiaal is de groene polyester stof, slijtvastheid en duurzaam. De lage frictie zorgt ervoor dat de tilband gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd. Voor bad- en douche wordt een tilband van Plastic Coated

materiaal aanbevolen. Wanneer de tilband moet blijven zitten onder de cliënt raden wij het grijze polyester net materiaal aan. Dat is luchtig en vormt een goede keus als verblijfsband.

Ook heeft de verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg, geleid tot het ontwikkelen van een reeks disposable tilbanden.





**Tilband en tiljuk
samen een functionele
veilige eenheid.**



Tilbanden voor lopen



Het opnieuw leren lopen of ondersteunen van een revalidatie traject met looptraining wordt voor zowel de cliënt als de hulpverlener verlicht door het gebruik van een tilband van Lopital. De mogelijkheid om te gaan staan en het skelet en spieren te belasten is niet alleen goed voor de gezondheid op fysiek gebied. Het geeft ook een dosis bevrediging en meer zelfvertrouwen. Met de tilaccessoires van Lopital worden nieuwe mogelijkheden geboden om te kunnen staan en te bewegen



Art.nr	Art. Omschrijving	Modelnummer	Materiaal	Goede rombalans	Verminderde rombalans	Nek-hoofd ondersteuning	Tillen van de vloer	toilet	amputatie	pijngevoelig	verminderde stafunctie	Liggend	Baden/Douchen	Verblijfsband	Looptraining
2403564011X	Master vest met voorsluiting poly	640	Polyester		•						•				•
2403592032X	Liftbroek poly net	920	Polyester		•						•				•

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.

Alle modellen zijn verkrijgbaar van XS tot XL. Voor speciale obesitas maten zie het hoofdstuk 'Tilbanden voor obesitas'.

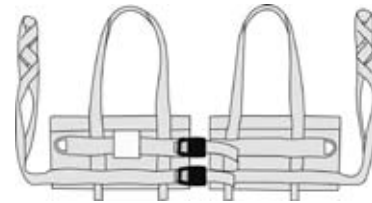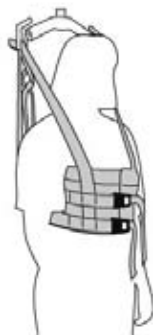


Mastervest, model 640

- Met clipsluiting aan voorzijde.
- Aan voorzijde verstelbaar voor buste en maag.
- Voor cliënten die zelfstandig kunnen staan.
- Beenstraps (accessoire) kan geschikt zijn voor sommige cliënten.

Tilbroek, model 920

- Voor cliënten die zelfstandig kunnen staan.
- Veilig en betrouwbaar voor opstaan, staan, lopen en balanstraining.
- Voor natuurlijke bewegingen bij het opstaan.
- Tilbroek ultra, model 920 ontwikkeld voor ambulante training van bariatriccliënten.

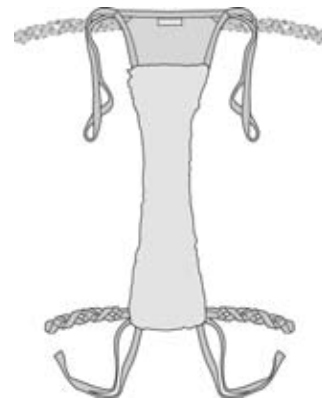

Tilbanden voor zitten

Tillen in een zittende houding is een van de meest voorkomende tilhoudingen. Maar omdat elk lichaam anders is, bieden wij ook daarin een ruim assortiment verschillende tilbanden. Met een tilband die het hele lichaam steun biedt, geschiedt deze verplaatsing op de meest comfortabele wijze zowel wat betreft de cliënt als de verzorgende.



Art.nr	Art. Omschrijving	Modelnummer	Materiaal	Goede rompbalans	Verminderde rompbalans	Nek- hoofd ondersteuning	Tillen van de vloer	toilet	amputatie	pijngevoelig	verminderde stafunctie	Liggend	Baden/Douchen	Verblijfsband	Looptraining
2403500011X	Universal tilband poly net verst	000	Polyester	•						•					
2403500031X	Universal tilband poly net verst	000	Polyester net	•						•				•	
2403500040X	Universal tilband poly net verst	000	Plastic coated	•						•			•		
2403520011X	Original HB tilband poly verst	200	Polyester		•	•	•			•		•			
2403520031X	Original HB tilband poly verst	200	Polyester net		•	•	•			•		•		•	
2403520040X	Original HB tilband poly verst	200	Plastic coated		•	•	•			•		•	•		
2403522060X	Silhouet tilband poly net	220	Polyester Net		•	•	•			•		•		•	
2403530030X	Comfort tilband Plus poly net	300	Polyester Net	•			•			•		•		•	
2403535030X	Comfort tilband Plus HB poly net	350	Polyester Net		•	•	•			•		•		•	
2403540013X	Hygiene tilband verst poly	400	Polyester	•				•							
2403545013X	Hygiene tilband Veiligheidsclip	450	Polyester	•				•							
2403550011X	Hygiene vest poly verst	500	Polyester		•			•							
2403575011X	Amputatie tilband HB poly	750	Polyester		•	•	•		•	•				•	

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.

Alle modellen zijn verkrijgbaar van XS tot XL. Voor speciale obesitas maten zie het hoofdstuk 'Tilbanden voor obesitas'.

model 000

Universal tilband

- Goed standaardmodel, ideaal voor de meeste cliënten.
- Biedt steun voor de gehele rug.
- De cliënt houdt zijn armen binnen de tilband.



model 200

Original highback tilband

- Goede keuze voor tillen vanuit een horizontale positie.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Semi-achteroverzittende houding.



model 220

Silhouetband

- Een plooibare tilband van netweefsel voor het tillen naar voorgevormde stoelen en ondersteuning.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.



model 400

Hygiëneband

- Voor cliënten met een goede stabiliteit.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- De cliënt houdt zijn/haar armen buiten de tilband.



model 450

Hygiëneband

- Voorzien van een veiligheidsriem, ideaal voor cliënten met weinig stabiliteit.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.



model 500

Hygiëneband

- Geschikt voor cliënten met een hoge / lage tonus en spasticiteit.
- Mogelijkheid om uit- en aan te kleden tijdens tillen bij toiletbezoek.
- Ondersteunt en tilt rond het bovenlichaam.



model 300 / 350

Comfortband plus


- Goed voor cliënten met beenamputaties en cliënten met pijnlijke gewrichten.
- Voor een open buighoek van de heupen.



model 750

Amputatieband

- Voor cliënten met een een- of tweezijdige dijbeenamputatie.
- Biedt steun voor de gehele rug en het hoofd.
- Semi-achteroverzittende houding.

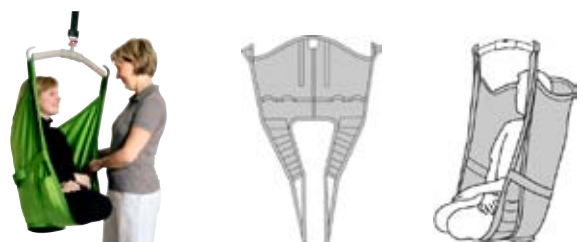

“Elk model heeft unieke eigenschappen die speciaal aan de verschillende behoeften zijn aangepast.”



Duidelijke labels met product informatie



Markeer bij eerste gebruik



Duidelijke kleurcode-ring op elke tilband



Optie: kleurclips



Multistrap

In veel zorgsituaties is er behoefte aan het tillen en omhooghouden van een lichaamsdeel, bijv. een arm of voet. Bij bijzonder zware cliënten kan het ook nodig zijn de buik te tillen. Samen met een plafondlift is de MultiStrap de perfecte tiluitrusting. Ook disposable verkrijgbaar.



Handytube

De HandyTube is een glijlaken dat vooral wordt gebruikt om een cliënt hogerop in bed te leggen, hem in bed te draaien of naar een ander bed te verplaatsen.



Handysheet

Het onder een bijzonder zware cliënt aanbrengen van een tilband kan erg zwaar werk zijn. De HandySheet maakt dit gemakkelijker en kan ook worden gebruikt voor kleinere verplaatsingen in het bed.



Handybelt

De HandyBelt vereenvoudigt korte verplaatsingen, zonder mechanische tiluitrusting. De band wordt gebruikt voor cliënten die minder mobiel zijn maar die slechts weinig hulp nodig hebben om zichzelf te verplaatsen.




Reposheet

Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is zwaar werk. De RepoSheet heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift. Ook disposable verkrijgbaar.

Tilbanden voor opstaan

De Sabina Opstalift is een handige en veelzijdige opstalift, bedoeld voor gebruikers die zelf actief kunnen deelnemen aan de opstaprocedure en na het opstaan wel stabiel kunnen blijven staan. De Sabina Opstalift onderscheidt zich van andere opstaliften, dankzij doordachte accessoires waarmee meerdere unieke mogelijkheden met slechts één lift kunnen worden gerealiseerd. Voor de Sabina zijn onder andere twee verschillende tiljukken en meerdere verschillende tilvesten verkrijgbaar, om het opstaan aan de voorwaarden van de cliënt aan te kunnen passen.

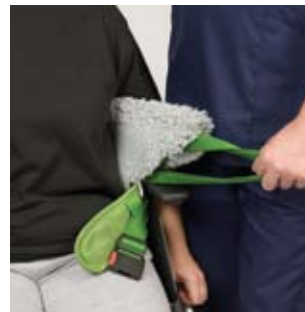

Art.nr	Art. Omschrijving	Modelnummer	Materiaal	Goede rombalans	Verminderde rombalans	Nek-hoofd ondersteuning	Tillen van de vloer	toilet	amputatie	pijngevoelig	verminderde stafunctie	Liggend	Baden/Douchen	Verblijfsband	Looptraining
2403591013X	Ondersteuningsvest	910	Polyester	•	•			•			•				•
2403593011X	Veiligheidsvest	930	Polyester	•	•			•			•				•
2403594041X	Veiligheidsvest HB	940	Polyester	•	•			•			•				•

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.

Alle modellen zijn verkrijgbaar van XS tot XL. Voor speciale obesitas maten zie het hoofdstuk 'Tilbanden voor obesitas'.



model 910
Ondersteuningsvest

- Comfortabel en gebruiksvriendelijk vest.
- Tilt rond de rug en onder de armen.
- Bekleed met corduroy zodat het niet naar boven kan glijden.
- Wordt gebruikt in combinatie met het 350-tiljuk.



model 930
Veiligheidsvest

- Een uniek vest qua veiligheid, vorm en functie.
- Tilt rond de rug en onder de armen.
- Door het kruisen van de lussenbanden kun je de aantrekspanning rond de middel regelen
- Wordt gebruikt in combinatie met het 350-tiljuk.



model 940
Veiligheidsvest met hoge rugondersteuning

- Vergelijkbaar met het Veiligheids-model 93, maar dan voorzien van hoge rug voor extra steun in de rug.
- Wordt gebruikt in combinatie met het 350-tiljuk.



model 950
Comfortvest

- Geschikt voor CVA-cliënten of cliënten met pijnlijke schouders.
- Tilt met de armen binnen het vest.
- Wordt gebruikt in combinatie met het Comfort-tiljuk.

Tilbanden voor horizontaal tillen

Het verplaatsen van cliënten in een horizontale positie, bijvoorbeeld in verband met operaties, röntgenfoto's of intensive care is vaak een uitdaging. Het moet snel, eenvoudig en ergonomisch verlopen voor zorgverleners en comfortabel en veilig zijn voor de cliënt. Onze horizontale tiljukken en accessoires voldoen aan al deze vereisten. De stretchers zijn bevestigd aan een lift zodat de cliënt in een horizontale positie kan worden verplaatst van bijv. bed naar brancard zonder inspannend handmatig tilwerk voor de zorgverleners.



Art.nr	Art. Omschrijving	In combinatie met	Materiaal	Goede rompbalans	Verminderde rompbalans	Nek-hoofd ondersteuning	van de grond tillen	toilet	amputatie	pijngevoelig	Verminderde been- of stafunctie	Liggend	Baden/Douchen	Verblijfsband	Looptraining
240368310X	Liftsheet Octo (M of L)	OctoStretch	Polyester	•	•	•			•	•	•	•	•		
240368340X	Liftsheet Octo (M of L)	OctoStretch	Plastic coated	•	•	•			•	•	•	•	•		
2403684105	Liftsheet XL Regular 165cm	FlexoStretch	Polyester	•	•	•			•	•	•	•	•		
2403684106	Liftsheet XL Tall 185cm	FlexoStretch	Polyester	•	•	•			•	•	•	•	•		
2403685704	Liftsheet 1900 2-piece	LikoStretch	Cotton / Polyester	•	•	•			•	•	•	•	•		
2403685705	Liftsheet 1900	LikoStretch	Cotton / Polyester	•	•	•			•	•	•	•	•		
2403687701	RepoSheet Original Regular	2-punts juk	Cotton / Polyester												
2403687301	RepoSheet Original Regular	2-punts juk	Polyester net												
2403687302	RepoSheet Original Ultra	2-punts juk	Polyester net												

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.



OctoStretch



FlexoStretch



Reposheet



LikoStretch 1900



Tilbanden voor obesitas

Lopital adviseert, implementeert beleid en biedt zorgoplossingen voor mensen met obesitas. Deze doelgroep vraagt om een specifieke manier van werken en aangepaste producten. Doordat de hulpmiddelen die wij aanbieden samen met mensen met obesitas ontwikkeld zijn, is 'Life without limits' ook voor hen binnen handbereik. Wij kunnen hulpmiddelen aanbieden voor het tillen van gebruikers tot 500kg.




Art.nr	Art. Omschrijving	Modelnummer	Materiaal	Maten	Goede rompbalans	Verminderde rompbalans	Nek-hoofd ondersteuning	Tillen van de vloer	toilet	amputatie	pijngevoelig	verminderde stafunctie	Liggend	Baden/Douchen	Verblijfsband	Looptraining
240350611X	Ultra Tilband	06	Polyester	Short, Regular, Long	•	•	•			•	•					
2403592032X	Ultra Liftpants	920	polyester net	XXL, XXXL	•											•
2403687302	Reposheet Ultra	87	Polyester net HT	Ultra		•	•	•		•	•	•				
240368410X	Liftsheet XL	84	Polyester	Regular, Tall		•	•	•		•	•	•				

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.

RepoSheet Ultra

Het draaien en verleggen van zware cliënten om doorliggen te voorkomen is in vele instellingen zwaar werk. De RepoSheet is geschikt voor de zwaarste cliënten en heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.). Hij kan worden gebruikt met het UltraTwin-systeem of bijvoorbeeld een Viking mobiele lift.

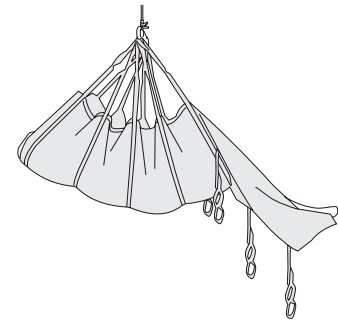

Ultra Tilband

De UltraSling is onze tilband voor het zittend tillen / verplaatsen van de zwaarste cliënten. De tilband heeft aparte beendelen die verbonden zijn met het tiljuk. De UltraSling heeft een maximale belasting van 500 kg (1100 lbs.) en wordt samen gebruikt met ons UltraTwin-systeem, in een permanente installatie of vrijstaand in de FreeSpan.

Looptraining met broektilband

Het op eigen benen laten staan van zware cliënten is een bijzonder belangrijke stap in hun revalidatie, bijvoorbeeld na een operatie. De Ultra broektilband geeft een goede ondersteuning voor het gehele lichaam en geeft de cliënt het vertrouwen om de eerste stappen te zetten. Max. belasting tot 500 kg (1100 lbs.).



Disposable tilbanden

De verspreiding van meervoudig resistente bacteriën (MRSA) binnen de gezondheidszorg en de toegenomen vraag naar producten voor kortdurend gebruik hebben samen geleid tot het ontwikkelen van de Solo, een reeks wegwerp-tilaccessoires. Het unieke van de meeste Solo-producten, vergeleken met onze gewone tilaccessoires, is dat ze gemaakt zijn van een bijzonder sterk non-woven materiaal. Solo-producten zijn niet bedoeld om te worden gewassen maar worden weggegooid als ze vuil zijn geworden of wanneer de cliënt ze niet meer nodig heeft. Met andere woorden, ze zijn ontworpen voor kortdurend gebruik door één cliënt.

De tilaccessoires zijn effectief in het voorkomen van de verspreiding van infecties, maar hebben daarnaast economische en praktische voordelen: wassen is niet meer nodig, en ze zijn altijd onmiddellijk beschikbaar op de afdeling.



Art.nr	Art. Omschrijving	Modelnummer	Materiaal	Maten	Goede rompbalans	Verminderde rompbalans	Nek-hoofd ondersteuning	Tillen van de vloer	toilet	amputatie	pijngevoelig	verminderde stafunctie	Liggend	Baden/Douchen	Verblijfsband	Looptraining
240352591X	Solo HB tilband	250	Non woven	M, L		•	•	•				•				
24036871003	Solo Reposheet	870	Non woven	180x110cm		•	•	•				•				
2403683900X	Solo Octo Liftsheet	830	Non woven	M, L		•	•	•				•				
2503695910X	Solo Multistrap	950	Non woven	Wide												

x: Hier moet het getal worden ingevuld wat de maat van de tilband aangeeft.

Alle modellen zijn verkrijgbaar van XS tot XL. Voor speciale obesitas maten zie het hoofdstuk 'Tilbanden voor obesitas'.



Solo HighBack Tilband

De Solo HighBack is een voor de meeste cliënten passende tilband. De Solo HighBack tilband kan in alle tilsituaties worden gebruikt, bijvoorbeeld bij tillen van bed naar rolstoel en naar het toilet.



Solo RepoSheet

De Solo RepoSheet wordt gebruikt om cliënten die in bed omlaag zijn gegleden weer hogerop te tillen of om bedlegerige cliënten te draaien, bijvoorbeeld bij het wassen of voorkomen van doorligplekken.



Solo Octo tildoek

De Solo Octo tildoek is bedoeld voor horizontaal tillen met de Liko OctoStretch. De OctoStretch is eenvoudig te gebruiken en wordt ook op de afdelingen chirurgie en intensive care zeer gewaardeerd.




Solo MultiStrap

Solo MultiStraps tillen en ondersteunen delen van het lichaam van de cliënt en vereenvoudigen zo onderzoek, zorg en behandeling. Solo MultiStraps kunnen ook worden gebruikt om een cliënt in bed te draaien en om hem te ondersteunen als hij op zijn zij ligt.

Tiljucken en Accessoires



3156228
LikoScale
Max 350kg

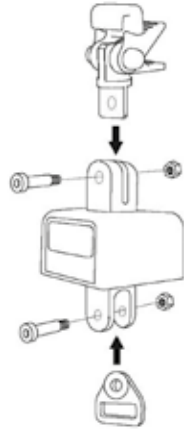

3156232
Adapter set Likoscale
Max 350kg



3156511
Support Springs Long
Max 70kg



Optie: verlengslussen



3156513
Support Springs Short
Max 100kg

**Optie: Bescherm-
kussen t.b.v. tiljuk**



3156084
Universal SlingBar 350
with Quick-release Hook™



3156085
Universal SlingBar 450



3156086
Universal SlingBar 600
With quick-release hook



3156094
Universal SlingBar 350 R2R™
with R2R hook™



3156087
Universal TwinBar 670
with Quick-release Hook™



3156022
Sling Cross-bar 450
with Quick-release Hook™

Combinaties van accessoires/producten die anders zijn dan aanbevolen door Liko kunnen leiden tot risico's voor de veiligheid van de cliënt. De maximale belasting van het geheel wordt bepaald door de lift of het accessoire met de laagste maximale belasting.

Alle hierboven geplaatste tiljucken zijn belastbaar tot 300kg

Veiligheid, functionaliteit en betrouwbaarheid vormen onze belangrijkste richtlijnen bij het toepassen van tilbanden en accessoire.

Verzorging, onderhoud en gebruik tilbanden en accessoires

Om het overdragen van besmettelijke ziektes te voorkomen is het belangrijk de tilband te reinigen als deze vuil is geworden of gebruikt wordt door een andere cliënt.

Tilbanden van Liko zijn gemaakt van verschillende materialen, met verschillende eigenschappen.

De tilbanden moeten in de machine worden gewassen.

De temperaturen voor het wassen en drogen staan op het productlabel. Het drogen moet zo snel mogelijk na het wassen plaatsvinden, bij voorkeur in een wasdroger of droogkast. Wat betreft drogen zijn er enkele producten die niet in de wasdroger mogen en enkele die niet op een hoge temperatuur mogen worden gedroogd.

Verschiede tilbanden van Liko bevatten versterkende materialen, bijvoorbeeld: versterkte beensteunen en ondersteuning voor rug en hoofd. Dit materiaal mag worden gewassen op 60 - 80°C. Bij een hogere temperatuur kan het versterkende materiaal gaan vervormen en hard worden; dit betekent minder comfort. De veiligheid van de tilband wordt daardoor over het algemeen niet aangetast. Het is belangrijk de aanbevolen instructies over verzorging en onderhoud op te volgen; zo niet, dan vervalt de garantie en wordt de levensduur van de tilband korter.

Controleer de tilband na het wassen.

Alle punten worden gecontroleerd op slijtage en beschadigingen: materiaal, banden, zomen, draagglussen, gespen.


De tilband heeft een beperkte levensduur en strenge controle is een belangrijk onderdeel voor veilig gebruik. Gebruik geen beschadigde tilbanden. Er kan een protocol, zie NEN7506, voor periodieke inspectie worden gebruikt als richtlijn voor de onderdelen die extra belangrijk zijn. Tilbanden van polyester hebben een langere levensduur dan banden van netpolyester. De handgrepen aan bepaalde tilbanden zijn bedoeld voor het sturen. Door een te zware belasting van de handgrepen kunnen deze scheuren.

De Solo-producten van Liko zijn wegwerpproducten, bedoeld voor individueel gebruik Solo-producten mogen niet worden gewassen maar moeten worden weggegooid als ze vuil zijn geworden of als de cliënt ze niet meer nodig heeft.

In gevallen waarin een andere fabrikant accessoires / producten van Liko aanbeveelt in combinatie met hun eigen of andere accessoires / producten terwijl die combinaties niet door Liko zijn goedgekeurd is die fabrikant aansprakelijk voor alle accessoires / producten van die combinatie. In dergelijke gevallen verwijst Liko naar de gebruiksaanwijzingen en aanbevelingen van de verantwoordelijke fabrikant over het gebruik, onderhoud, reinigen, controleren en inspectie van de combinatie om te voldoen aan de vereisten van EN ISO 10535.

Wasinstructies

Volg de wasinstructies op het productlabel van de tilband op.

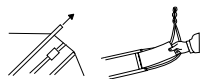

Verwijder kunststof baleinen (indien van toepassing).



Voer zonodig een voorwas uit bij lage temperatuur, 25-30°C. Sommige vlekken gaan er gemakkelijker uit bij een lage temperatuur.



60-80°C
140-176°F

Draai de machinewas op de aangegeven temperatuur. Gebruik reinigingsmiddel.



Droog in de wasdroger bij maximaal 50°C, of in de droogkast.



Bleken met chloor is niet toegestaan.



Chemisch reinigen is niet toegestaan.



Strijken is niet toegestaan.

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

